

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS**COORDINACIÓN PROCESO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LABORATORIO DE EQUIPOS CIENTÍFICOS - ADMINISTRACIÓN SIUISO/IEC 17025:2005
12-LAC-010CERTIFICADO No. CÓDIGO INTERNO DEL CLIENTE **I. IDENTIFICACIÓN DE LA MICROPIPETA**

MARCA	<input type="text" value="EPPENDORF"/>	MODELO	<input type="text" value="RESEARCH PLUS"/>
No. DE SERIE	<input type="text" value="O29341C"/>	RANGO DE MEDICIÓN (µl)	<input type="text" value="100 a 1000"/>
No. CANALES	<input type="text" value="1"/>	RESOLUCIÓN (µl)	<input type="text" value="1"/>

II. DATOS DEL USUARIO/CLIENTE

USUARIO/CLIENTE	<input type="text" value="AOXLAB"/>
DIRECCIÓN	<input type="text" value="Calle 32 F No. 74B-122."/>
CIUDAD	<input type="text" value="Medellín"/>
FECHA DE RECEPCIÓN	<input type="text" value="2017-10-02"/>
FECHA DE CALIBRACIÓN	<input type="text" value="2017-10-11"/>

III. MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El equipo fue calibrado por el método gravimétrico, el cual consiste en determinar la masa del agua grado III a partir de la diferencia de la masa del recipiente vacío y la masa del recipiente con agua; el control de la temperatura del agua, de la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la humedad relativa, para realizar la evaluación del volumen a la temperatura de referencia. La densidad del agua grado III se conoce en función de la temperatura de la prueba. Esta calibración está basada en las normas ISO 8655-6:2002 e ISO 8655-6:2002, Corrigendum 1:2008 y se encuentra establecida en el Procedimiento de Calibración de Equipos de Medición (P-GA-03)

IV. CONDICIONES AMBIENTALES

Los valores reportados son el promedio de las condiciones ambientales medidas al inicio y al final de la calibración.

Temperatura (°C)	<input type="text" value="17,0"/>	Humedad relativa (%)	<input type="text" value="66"/>	Presión atmosférica (hPa)	<input type="text" value="852"/>
------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------------

V. RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CANAL No.:

Los resultados contenidos en la siguiente tabla son valores promedios obtenidos de diez (10) mediciones:

	Volumen seleccionado (µl)	Volumen calculado (µl)	Error Sistemático Calculado (µl)	Error Aleatorio Calculado (µl)	Error Sistemático Permitido (µl)	Error Aleatorio Permitido (µl)	Incertidumbre de la medición expandida (µl)
Máximo	1000	1002,92	2,92	0,31	8,0	3,0	0,92
Medio	500	499,27	-0,73	0,14	8,0	3,0	0,48
Mínimo	100	101,08	1,08	0,22	8,0	3,0	0,22


Resultado volumen máximo:	1002,92 µl	±	0,92 µl
Resultado volumen medio:	499,27 µl	±	0,48 µl
Resultado volumen mínimo:	101,08 µl	±	0,22 µl

CERTIFICADO No.

CCLEC-ASIU-4245

CÓDIGO INTERNO DEL CLIENTE

N.I.

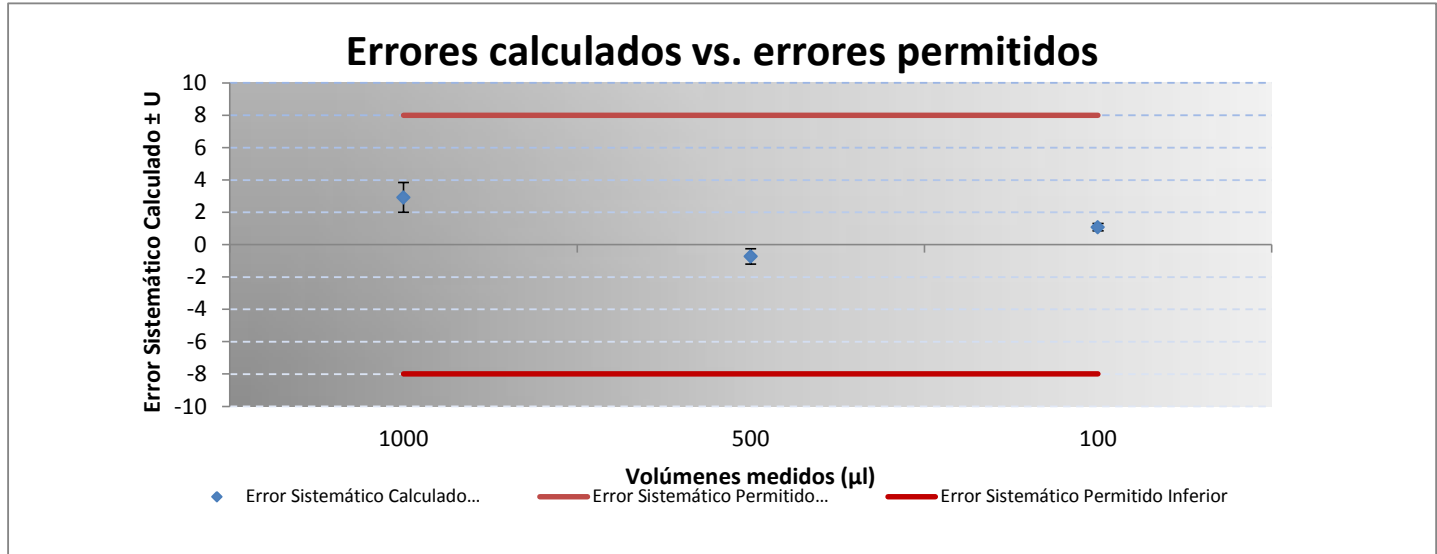

La incertidumbre expandida de la medición se establece como la incertidumbre normalizada de la medición multiplicada por el factor de cobertura $k=2$, tal que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente al 95%.

VI. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La estimación de la incertidumbre se encuentra basada en el ISO/TR 20461:2000 e ISO/TR 20461:2000, Corrigendum 1:2008 y el Procedimiento de Estimación de la Incertidumbre de la Medición en Calibración de Equipos (P-GA-07); considerando las fuentes de incertidumbre debidas a efectos aleatorios (repetibilidad de la prueba) y sistemáticos (instrumento de pesaje, densidad del aire, temperatura del agua y el equipo a calibrar).

VII. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

Equipo	Serie	No. Certificado	Calibrado por	Fecha de calibración
Semimicrobalanza CPA225D (d1)	28204870	5765M	Detecto	12/03/2015

El Laboratorio de Equipos Científicos de la SIU garantiza la trazabilidad de sus patrones utilizados en estas mediciones a patrones nacionales o internacionales.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS

COORDINACIÓN PROCESO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LABORATORIO DE EQUIPOS CIENTÍFICOS - ADMINISTRACIÓN SIU



ISO/IEC 17025:2005
12-LAC-010

CERTIFICADO No.

CCLEC-ASIU-4245

CÓDIGO INTERNO DEL CLIENTE

N.I.

VIII. RESULTADOS ANTES DE AJUSTE

Volumen seleccionado (µl)	Volumen calculado (µl)	Error Sistemático Calculado (µl)
1000	989,10	-10,90
500	493,52	-6,48
100	99,83	-0,17

Observaciones

Los certificados de calibración sin firmar no tienen validez.

Para comprobar la validez de las firmas digitales del presente certificado debe disponer de la versión más reciente de Adobe Acrobat Reader para abrirlo y una vez abierto debe hacer clic en la opción "Panel de Firma".

Al instrumento se le realizó ajuste

Base de ajuste (Ex) y temperatura de referencia (20°C).

Para la calibración del equipo se emplearon puntas sin filtro.

Se debe tener en cuenta que los resultados de las mediciones que se realicen con esta micropipeta se pueden ver afectados por el error sistemático y la incertidumbre de la medición expandida.

Los resultados presentados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de Equipos Científicos de la SIU no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.

Los errores máximos permitidos declarados en el presente certificado fueron tomados de la Norma ISO 8655-2:2002 e ISO 8655-2:2002, Corrigendum 1:2008 capítulo 7 "Requisitos Metrológicos de Rendimiento", tabla 1 "Máximos errores permisibles para micropipetas monocanal tipo A y D1". Los máximos errores permitidos para micropipetas multicanal serán el doble de los especificados en la tabla 1 para micropipetas monocanal.

La calibración del equipo se realizó en la sede del Laboratorio de Equipos Científicos.

El usuario es responsable de determinar la aptitud de uso del equipo de acuerdo con la tolerancia especificada en su proceso así como de repetir la calibración del equipo a intervalos apropiados.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita del Laboratorio.

Vía correo electrónico recibirá el documento "Buenas prácticas de pipeteo" con el fin de garantizar un uso adecuado del equipo y disminuir los errores en los volúmenes dispensados.

En caso de requerir presentar al laboratorio una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitación - PQRSDF, puede hacerlo en línea a través del link: <http://siuweb.udea.edu.co:8080/pqrs/>.

Realizó el control gravimétrico:

Luis Felipe González Botero

Auxiliar de Laboratorio de Metrología

Aprobado por:

Juan Felipe Gallego Sierra

Ingeniero de Equipos Científicos

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN